


HumaLOG Mix50 300IU 優泌樂筆- 混合型 50 100單位/毫升

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)


1

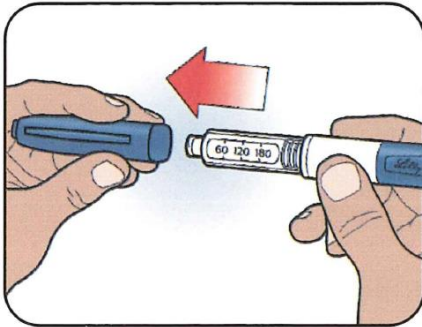

準備

- 直接抽出並取下筆蓋。
- 檢查胰島素的標籤，確認您注射正確的胰島素劑型。


2

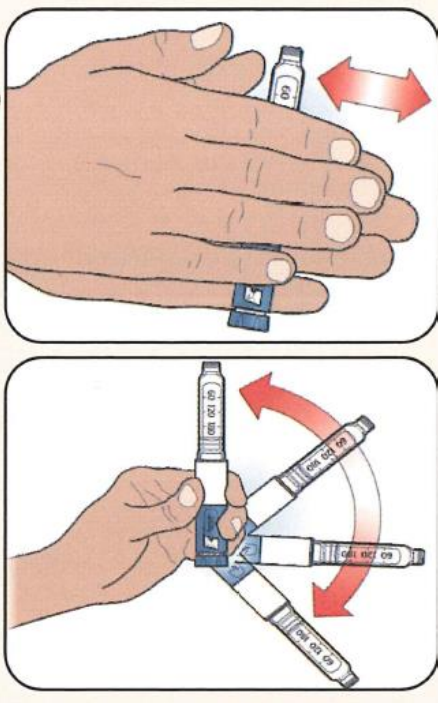

準備

- 若您使用的是：
 - 優泌樂筆混台型25 (Humalog Mix25 KWikPen)或
 - 優泌樂筆混台型50 (Humalog MiX50 KWikPen)時：
- 請小力滾動優泌樂筆10次，再上下擺動10次，直到胰島素呈均勻霧狀。

3

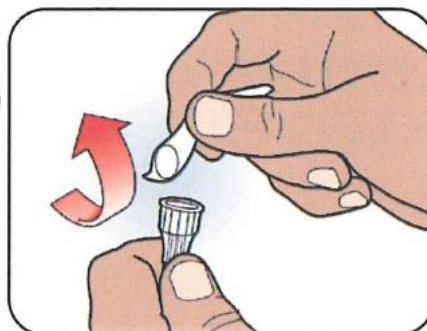

準備

- 撕開針頭外蓋紙片
- 以酒精棉球擦拭筆式小管卡匣套底端的橡皮塞。



1


T-C-0210-ED-102-04



HumaLOG Mix50 300IU優泌樂筆- 混合型 50 100單位/毫升

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)


4

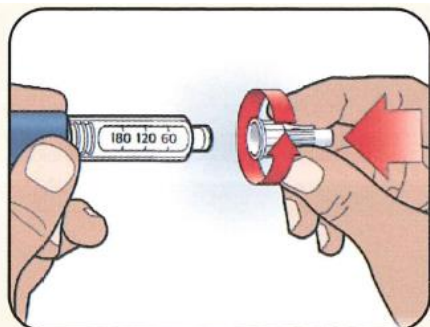

準備

- 將附蓋的針頭對準優泌樂筆後推上。
- 旋緊針頭。


5

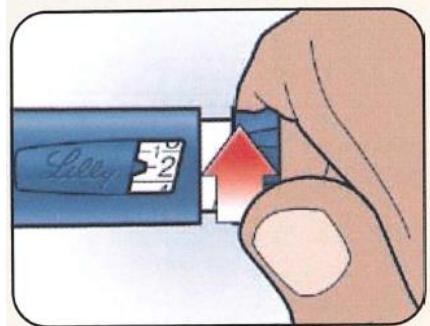

排空

- 轉動劑量旋鈕至2單位。


6

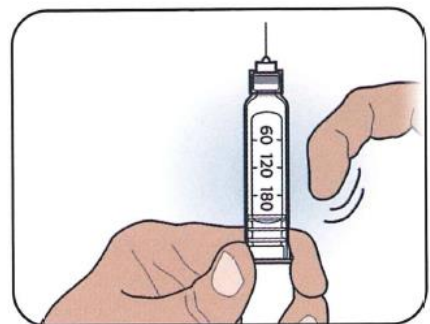

排空

- 將注射筆朝上。
- 輕拍筆式小管卡匣套，使空氣集中於頂端。

7

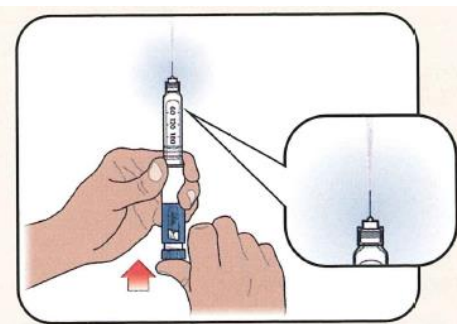

排空

- 針頭朝上，按下劑量旋鈕直到停住並看到顯示窗出現0。
- 按住劑量旋鈕並緩慢數到5。
- 胰島素呈直線自針頭尖端流出時，排空步驟即完成。
- 如果胰島素沒有呈直線流出，請重複裝填步驟5~7最多四次。

2




T-C-0210-ED-102-04



HumaLOG Mix50 300IU 優泌樂筆- 混合型 50 100單位/毫升

製定日期：102年9月11日
修定日期：109年7月1日(第4版)


8

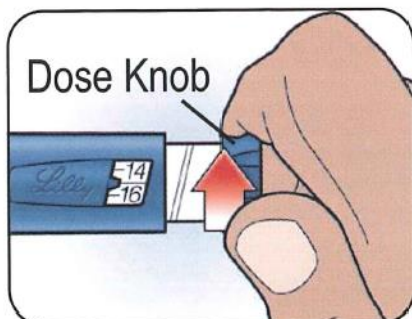

注射

- 轉動劑量旋鈕至您需要注射的單位數量。如果設定過多單位，可以往回轉更正。


9

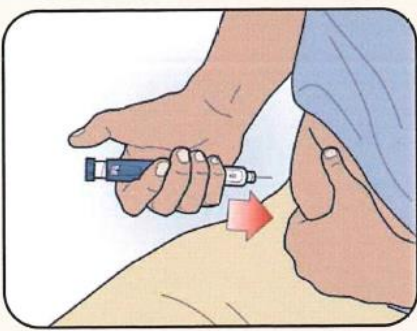

注射

- 使用醫療專業人員建議的注射技巧，將針頭插入皮膚。
- 拇指放在劑量旋鈕上，穩定按下直到旋鈕停止移動。

10

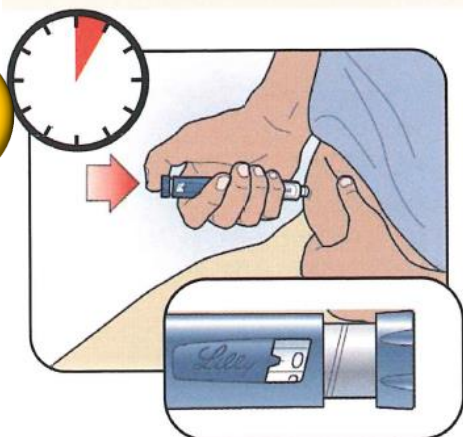

注射

- 按住劑量旋鈕並緩慢數到5，以投與完整的劑量。從皮膚拔出針頭。
- 注意：檢查劑量顯示窗中的數字是否為0，以確認您得到完整的劑量。



3

T-C-0210-ED-102-04

